

**Tytanizowane
Implanty Siatkowe
TiLOOP® Total PLUS
Zestaw do rekonstrukcji
dna miednicy**


TiLOOP® Total Implant siatkowy z zestawem do aplikacji dla łatwiejszego i bezpieczniejszego pozycjonowania i regulacji. Tytanizowane implanty siatkowe pfm medical wyróżniają się minimalnym odsetkiem stanów zapalnych i minimalnym ryzykiem wykurczenia się. Są one w 100% biozgodne, niezwykle lekkie i hydrofilowe dzięki obecności powierzchni tytanizowanej.

Dystrybutor

TRICOMED



www.pfmmedical.com

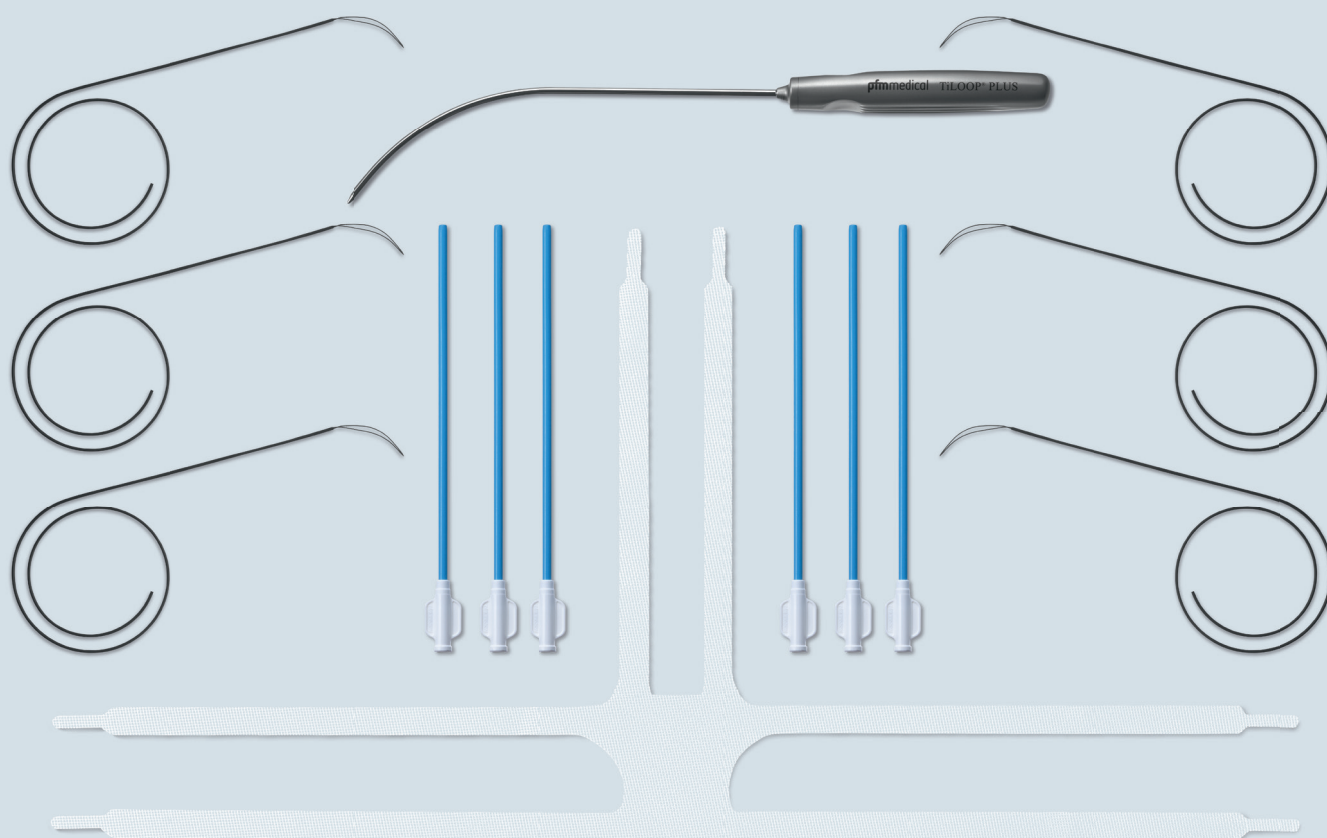

Tytanizowane implanty siatkowe **TiLOOP® Total** firmy pfm medical przeznaczone do rekonstrukcji dna miednicy wykonane są z opatentowanego, unikalnego materiału kompozytowego, kowalencyjnie związanego z powierzchnią tytanową.

Korzyści

Doskonała biogodność

- ▶ ultra lekka struktura
- ▶ Minimalne ryzyko stanów zapalnych
- ▶ Minimalny stopień wykurczenia się

Idealna poręczność

Ze względu na swoje właściwości hydrofilowe, TiLOOP® stwarza bardzo dobre warunki dla chirurga uroinekologa.

Wyrób na indywidualne zamówienie klienta

pfm medical oferuje możliwość stworzenia tytanizowanej siatki idealnie dopasowanej do potrzeb klienta.

Doskonała jakość życia

Doskonała biogodność zapewnia minimalne ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i krótki czas rekonwalescencji.

Unikalna światowa technologia


Opatentowane, nanotechnologiczne metody obróbki wykańczającej polegające na utworzeniu wiązania kowalencyjnego między powierzchnią polipropylenu i tlenku tytanu są unikalne w skali światowej.

Zastosowanie


Operacyjne leczenie wypadania narządu moczowo-płciowego

Ściana pochwy i wypadanie sklepienia pochwy, jak również jednoczesne wypadanie sklepienia pochwy oraz jednego z dodatkowych narządów (wypadanie: pęcherza moczowego, odbytnicy, jelita, kikuta pochwy, pojedynczo lub w połączeniu).

Wiedza

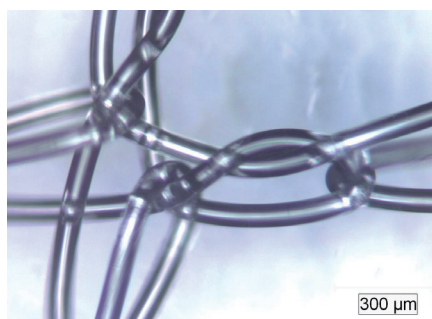

TiLOOP®, REM włókno monofilamentowe

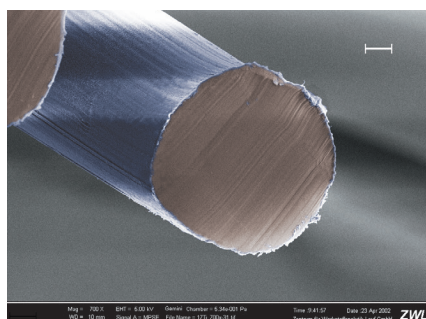

TiLOOP® cięcie:
włókno monofilamentowe, REM



Cięcie laserowe w celu otrzymania
zaokrąglonych, nieinwazyjnych
brzegów włókien

Dzianina implantacyjna

Siatka wykonana jest z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan (grubość warstwy tytanu - ok. 30 nm, gwarantowana elastyczność polimeru).

Masa powierzchniowa
35 g/m²


Wielkość porów
Większe niż 1 mm

TiLOOP® Total PLUS


TiLOOP® Total PLUS został opracowany w celu łatwiejszego i bezpieczniejszego pozycjonowania oraz dostosowania sprawdzonych już implantów siatkowych TiLOOP® Total. **TiLOOP® Total PLUS** składa się z implantu siatkowego TiLOOP® Total oraz zestawu do aplikacji TiLOOP® Total. **Zestaw do aplikacji TiLOOP® Total** zawiera od 4 lub 6 cewników TiLOOP® Total i od 4 lub 6 sideł TiLOOP® Total.

- ▶ Cewnik TiLOOP® Total jest wyrobem przeznaczonym do jednorazowego użytku, do zastosowania wraz z **instrumentami wielorazowymi TiLOOP® PLUS**. Wspomaga przejście sideł TiLOOP® Total oraz chroni otaczającą tkankę.
- ▶ TiLOOP® Total Snare (tzw. pętla) jest instrumentem jednorazowego użytku wykorzystywanym do wspomagania pozycjonowania i dostosowania implantów siatkowych TiLOOP®.

Skład

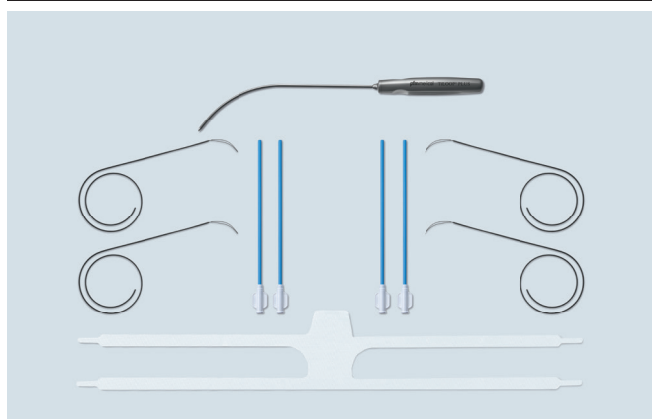

TiLOOP® Total 4 PLUS i TiLOOP® PLUS Instrumenty

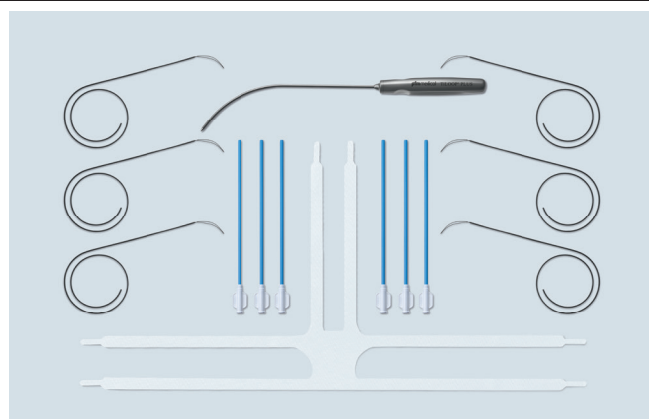

TiLOOP® Total 6 PLUS i TiLOOP® PLUS Instrumenty

Asortyment

TiLOOP® Total PLUS

Zastosowanie	Nazwa wyrobu	Skład	Wzór	Waga siatki	Indeks
Cystocele (wypadanie pęcherza moczowego)	TiLOOP® Total 4 PLUS	1 TiLOOP® Total 4 1 TiLOOP® Total 4 Zestaw do aplikacji		35 g/m ²	NM-271-T435-001
Rectocele (wypadanie odbytnicy)	TiLOOP® Total 6 PLUS mały	1 TiLOOP® Total 6 mały 1 TiLOOP® Total 6 Zestaw do aplikacji		35 g/m ²	NM-271-T635-001
Enterocela (wypadanie jelita do pochwy)	TiLOOP® Total 6 PLUS średni	1 TiLOOP® Total 6 medium 1 TiLOOP® Total 6 Zestaw do aplikacji		35 g/m ²	NM-271-T635-002
Prolapse (wypadanie organów)	TiLOOP® Instrumenty PLUS	Igła wielorazowego użytku			NM-292-TLAP-001

DYSTRYBUTOR



TRICOMED SA
Świętojańska 5/9
93-493 Łódź
www.tricomed.com



Toruńskie Zakłady
Materiałów Opatrunkowych SA
Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
www.matopat.pl

PRODUCENT



pfm medical ag
Wankelstraße 60
50996 Cologne
Germany
www.pfmmedical.com

Certified to DIN EN ISO 13485